

ALLCAM2 Просмотр видео через веб-браузер

Руководство пользователя

**(Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед
использованием)**

Содержание

Камера WIFI Обзор	2
Камера WIFI Обзор	2
Видео с камеры, отображаемое в веб-браузере	3
Особенности	3
Соединение	3
Показать видео с помощью веб-браузера	4
Устранение неполадок	4
Устранение неполадок	4



Камера WIFI Обзор

Камера WIFI Обзор

Встроенный/внешний Wi-Fi вариант



Вы можете выбрать внутренний WIFI или внешний WIFI. При выборе внешнего WIFI необходимо подключить внешний USB-модуль беспроводной связи.

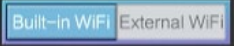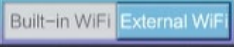-  В ы б и р а т ь в н у т р е н н и й WIFI (по умолчанию внутренний WIFI).
-  Выберите внешний WIFI (Внешний WIFI опционально) .



Вам необходимо перезагрузить систему, чтобы переключить выбор WIFI



Модуль WIFI не поддерживает горячее подключение. При использовании внешнего модуля WIFI беспроводной модуль USB необходимо отключить в состоянии отключения.

- ◆ Переключение между 5G и 2.4G
оборудование WIFI 5G , вы можете использовать WIFI 5G или 2.4G, который отображается в статусе WIFI . Нажмите на нее, чтобы переключиться.




**В и д е о с камеры отображается с помощью в е б -
браузера**

Функции

Применимая операционная система: Apple OS, Android, WINDOWS

СВЯЗЬ

- ◆ Получить IP-адрес камеры
Значок WIFI отображается в правом нижнем углу экрана .
Щелкните значок WIFI, после чего на экране отобразится информация о состоянии WIFI.
-

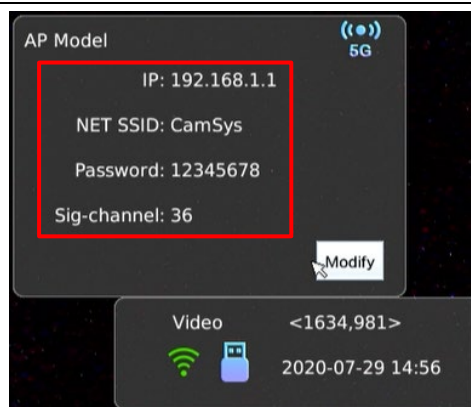


- ◆ Подключите телефон, компьютер или ноутбук к камере через WIFI камеры.
Откройте свой телефон или компьютер и подключитесь к указанному выше сетевому имени (« CamSys » можно изменить самостоятельно)

Показать видео с помощью веб-браузера

- ◆ Введите IP-адрес камеры в браузере, после чего будет показано изображение с камеры.
Рекомендуется браузер Google Chrome. Изображение может не показываться или отображаться очень медленно при использовании других браузеров.

Фигура

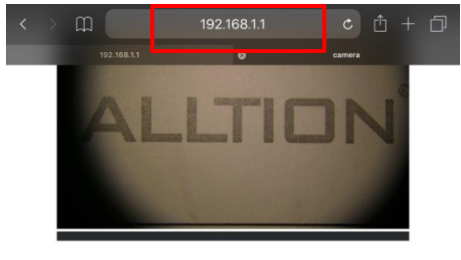Система Android	система Apple
 <p>Не сфотографировано</p>	 <p>Нажмите и удерживайте всплывающее меню, чтобы сделать снимок.</p>

Поиск неисправностей

Поиск неисправностей

Неисправности	Возможная причина	Решения
---------------	-------------------	---------

Клиентский терминал WIFI не отображает изображение	Не удалось подключиться к Wi-Fi	Проверьте, подключено ли оборудование WIFI, проверьте, включена ли функция WIFI.
	Проверьте, соответствует ли IP-адрес IP-адресу камеры.	Проверьте, соответствует ли IP-адрес программного обеспечения клиентского терминала IP-адресу камеры. Обновите систему

ALL-CAM2 Camera - ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕ

Руководство пользователя

**(Поддержка Android , Apple iOS, системы Windows, пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию перед ее использованием)**

Содержание

Камера WIFI Обзор	1
Камера WIFI Обзор	1
Обзор программного обеспечения клиентского терминала Camera APP	2
Установка программного обеспечения	2
Соединение	2
Введение в функции программного обеспечения	3
Устранение неполадок	4
Устранение неполадок	4


Камера WIFI Обзор

Камера WIFI Обзор

- **Встроенный/внешний Wi-Fi вариант**



Вы можете выбрать внутренний WIFI или внешний WIFI. При выборе внешнего WIFI необходимо подключить внешний USB-модуль беспроводной связи.

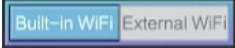-  Выбрать внутренний WIFI (по умолчанию внутренний WIFI).

-  Выберите внешний WIFI (Внешний WIFI опционально) .




Вам необходимо перезагрузить систему, чтобы переключить выбор WIFI



Модуль WIFI не поддерживает горячее подключение. При использовании внешнего модуля WIFI беспроводной модуль USB необходимо отключить в состоянии отключения.


- ◆ Переключение между 5G и 2.4G

оборудование WIFI 5G , вы можете использовать WIFI 5G или 2.4G, который отображается в статусе WIFI . Нажмите на нее, чтобы переключиться.

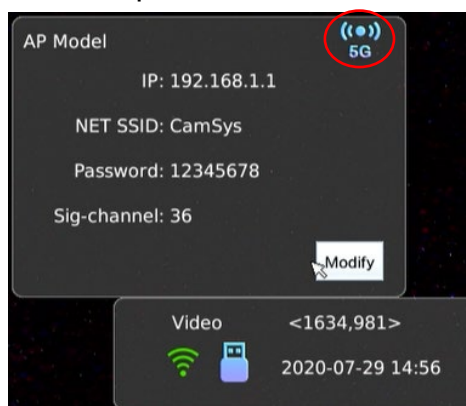


Обзор программного обеспечения клиентского терминала Camera APP

Установка программы

- Андроид** Скопируйте программное обеспечение APP на мобильный телефон Android, затем установите его, после установки появится значок CamSys . .
- Apple OS** Скачать с Apple APP Store .
-

Связь

- ◆ Получить IP-адрес камеры
Значок WIFI отображается в правом нижнем углу экрана . Щелкните значок WIFI, после чего на экране отобразится информация о состоянии WIFI.

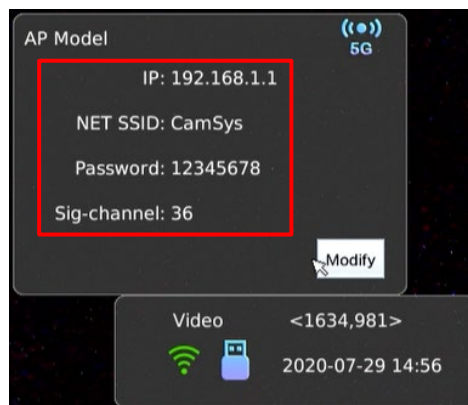

- ◆ Подключите телефон, компьютер или ноутбук к камере через WIFI камеры.
 - ◆ Откройте свой телефон или компьютер и подключитесь к указанному выше сетевому имени (« CamSys » можно изменить самостоятельно)
-

Введение в функции программного обеспечения

После открытия программного обеспечения интерфейс показан ниже.



Программный интерфейс

Знакомство с функциональными кнопками:



: Кнопка фотографирования, нажмите ее один раз, чтобы сфотографировать одно изображение и сохранить его в мобильном телефоне, но изображение не будет сохранено в камере.




: Установите место сохранения фотографий
Система Apple iOS не может установить место сохранения.

(1) Нажмите вернуться в предыдущий каталог, перетащите вверх и вниз, чтобы выбрать нужную папку.

(2) 9016-4EF8/360 Указывает текущую выбранную папку.

(3) После выбора сохраненной папки нажмите ОК.

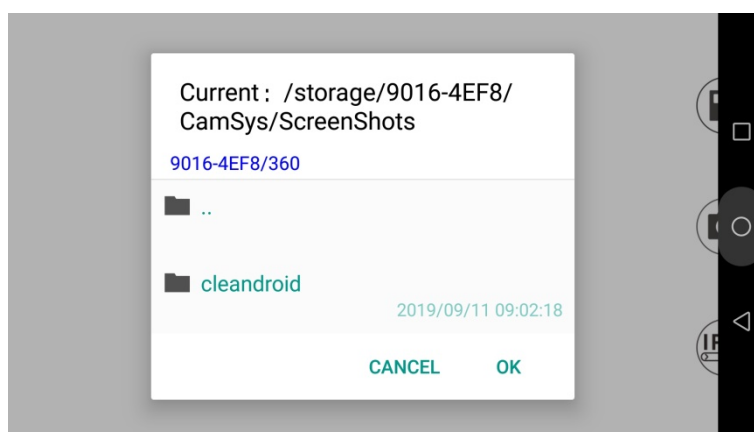


: Установите IP-адрес, щелкните его, чтобы ввести IP-адрес камеры, как показано ниже,

(1) Выберите: HTTP.

(2) Введите IP-адрес камеры

(3) Нажмите ОК, чтобы подключить камеру.

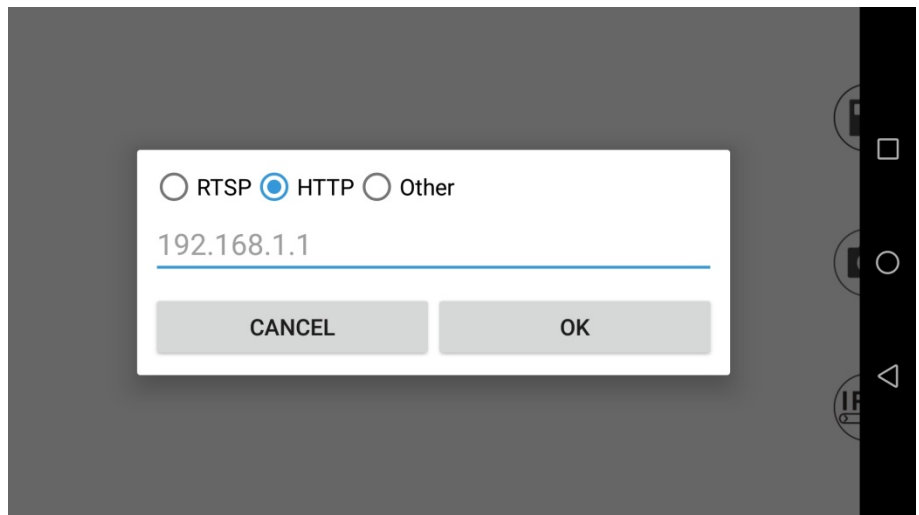

Айпи адрес

Поиск неисправностей

Поиск неисправностей

Неисправности	Возможная причина	Решения
Клиентский терминал WIFI не отображает изображение	Не удалось подключиться к Wi-Fi	Проверьте, подключено ли оборудование WIFI, проверьте, включена ли функция WIFI.
	Проверьте, соответствует ли IP-адрес IP-адресу камеры.	Проверьте, соответствует ли IP-адрес программного обеспечения клиентского терминала IP-адресу камеры. Обновите систему