



# HELIOS



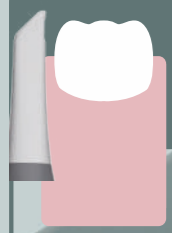

# Helios 600

Внутриротовой сканер

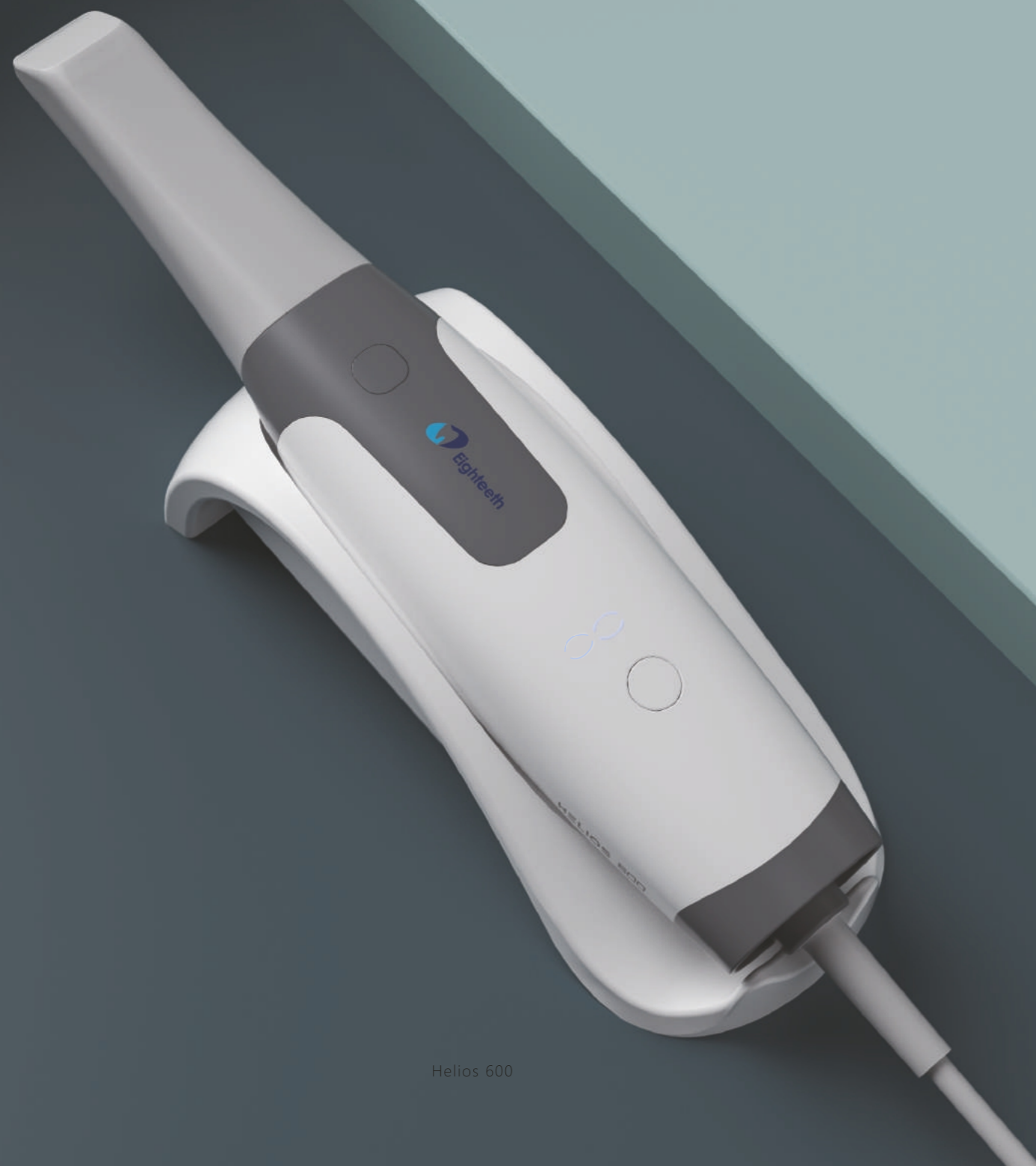

Helios 600



## Плавно войдите в век цифровых технологий с помощью Helios 600

Высокая точность и автоматическая калибровка - в мануальной калибровке больше нет необходимости

### Приготовьтесь к новым впечатлениям от цифровых технологий

Один из самых точных и быстрых сканеров на рынке

### Идеально ложится в руку

Малый размер позволяет быстро управлять устройством, а поле захвата достигает 16 мм x 14 мм



### Легче

198 г, один из самых легких сканеров, из представленных на рынке, сбалансированный, эргономичный и удобный



### Быстрее

С помощью Helios 600 можно получить полный скан зубной дуги всего за 30 секунд



### Умнее

Технология искусственного интеллекта учитывает мягкие и подвижные ткани и генерирует четкую и натуральную картину для предстоящего лечения





### Точнее

Как один из самых точных сканеров на рынке, Helios 600 представляет точность на уровне последних мировых достижений. Средняя погрешность при сканировании полной зубной дуги в полости рта достигает 20 мкм

Helios 600

## Helios 600

Не только полноценный интраоральный сканер,  
но также и интраоральная камера!

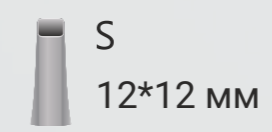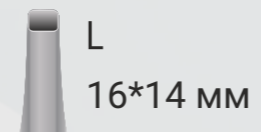

Съёмная головка сканера представлена в двух размерах

LED-источник  
Без напыления  
Не запотеваает



Сенсор положения для  
удобства работы




Две кнопки включения/выключения  
представлены с обеих сторон  
устройства для удобства сканирования



Кнопка для переключения режимов  
«верхняя челюсть», «нижняя челюсть»  
и «прикус»



Порт USB для подключения питания  
и передачи данных

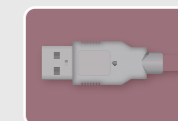


Твёрдый прочный корпус



Helios 600

## Начинайте сканировать сразу после включения

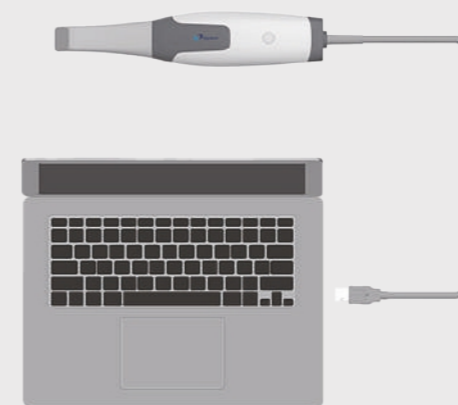

-  Умные оповещения
-  Функция курсора
-  Автоматическое обновление ПО
-  Оперативная сервисная поддержка
-  Облачное хранилище
-  Голосовые напоминания
-  Онлайн 3D viewer

## Спецификации

### Helios 600

Точность	Полная зубная дуга	20.0 мкм
Зона сканирования	16x14 мм (L)	
	12x12 мм (S)	
Наконечник	Размеры	219 x 46 x 36 мм
	Вес	198 г
	Кнопка захвата	С обеих сторон
Кончик	Размер (передняя часть)	22 x 18 мм (L)
		18.6 x 16.7 (S)
Подключение	Длина кабеля	1.8 м
	Тип подключения	USB 3.0
Калибрация	Калибрация точности	Без калибрации
	Калибрация цвета	Без калибрации
Специальный режим	Режим удаленного управления	Есть

### Рекомендуемые системные требования

Процессор	Intel Core™ i7 9 generation, base frequency 2,6 ГГц (или выше)
Память	16 ГБ (или больше) DDR4, frequency 2666 МГц (или выше)
Жесткий диск	512 ГБ (или больше) SSD
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 1650 (или лучше)
Дисплей	15.6" FHD (1920 x 1080) (или больше)
Другое	USB 3.0 порт
Операционная система	Windows 10 pro
Опции	Сенсорный экран

Helios 600