

Pro и Prime Line

Легенды. Возрождение. Совершенно новые автоклавы класса В и S.



#1

Прыжок в мире
самых продаваемых
автоклавов в мире

НОВЫЙ
как класс S
автоклав

Pro-Class

СФОРМИРОВАЛ ЦЕЛУЮ ЭПОХУ

Продается по всему миру. Любим по всему миру. Во всем мире мы являемся единственным семейным производителем автоклавов, который разрабатывает и производит продукцию исключительно в Германии. Продано более 300 000 единиц оборудования.

Pro-Class на протяжении десятилетий вдохновляет покупателей выдающимся качеством MELAG - сделано в Германии. Пришло время обновить классический бестселлер.

Pro Line и Prime Line

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ

Вы уже знакомы с автоклавами Pro-Class? Тогда вам понравится новое поколение MELAG - от их функций до цены! Совершенно новые модели Pro Line (как автоклавы класса B и S) и Prime Line (как автоклавы класса B) впечатляют во всем: Удивительная производительность, интеллектуальные функции, а также современный и чрезвычайно прочный дизайн открывают новые возможности. Мы не делаем компромиссы, когда речь идет о надежности, и разрабатываем оборудование в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству в нашей штаб-квартире в Берлине - ведь мы знаем, что автоклав никогда не должен подвести.



+ **Качество - сделано в Германии**
для максимальной надежности в повседневной практике

+ **Впечатляющая скорость**
в соответствии с EN 13060 для экономии времени

+ **Оптимальные результаты сушки**
для защиты от повторного загрязнения и коррозии

+ **Бескомпромиссный комфорт**
для легкого и безопасного управления

+ **Интеллектуальная концепция документации**
для полного и юридически грамотного доказательства

+ **Экологически чистые инновации**
для значительной экономии электроэнергии и воды

NEW **Идеально подходит для вашего бюджета и инструменты**
с автоклавами класса B и класса S

НЕ ПО КАРМАНУ



Made in Germany

Сделано в Германии. Сделано для вас.

Будущее нуждается в наследии: Мы разрабатываем, производим и оптимизируем наши системные решения для репроцессинга инструментов в нашей штаб-квартире в Берлине уже более 70 лет. MELAG - это искусство проектирования и производства „сделано в Германии“ с высочайшим уровнем качества.



Многое, что можно полюбить Предлагайте больше. Нуждайтесь в меньшем.

Будь то загрузка, стерилизация или документирование - компактные автоклавы MELAG класса B и S предлагают соотношение цены и качества, которое выдерживает любое сравнение. Таким образом, вы не только стерилизуете больше инструментов за меньшее время, но и экономите деньги. И все это при том качестве MELAG, которое вы знаете и качество MELAG, которое вы знаете и цените по проверенным моделям-предшественникам Pro-class.

**Больше
производительности**

25% выгоднее цена
для экономичного использования с первого дня.*

50% меньше работ по
техническому обслуживанию
благодаря увеличенным интервалам обслуживания в
2 года или 2 000 циклов.

96% Снижение расхода воды
благодаря новой концепции автономной системы
с высокоэффективным воздушным охлаждением**.

35% Сокращение времени цикла
обеспечивает эффективный процесс гигиены и,
таким образом, больше времени для того, что
действительно важно: Вашим пациентам.*

15% больше загрузки
до 5 лотков обеспечивает необходимую гибкость в
вашей ежедневной практике: Сейчас и в будущем.*

100% более интуитивное управление
благодаря сенсорному дисплею Smart-Touch,
светодиодному индикатору состояния и документация
через USB-накопитель - пользовательский опыт
выходят на новый уровень.

**Меньше
расходов**

Быстрый факт: Нужен ли вам автоклав для стерилизации даже больших грузов в рекордно короткие сроки? Тогда воспользуйтесь преимуществами нашего премиум-класса Evolution с уникальными продуктами по всему миру.



Мы любим инфекционный контроль. И окружающую среду.

Линии Pro и Prime сочетают в себе защиту окружающей среды и экономическую эффективность. Благодаря новаторской концепции автономной работы, функции энергосбережения Power энергосберегающей функции Power Save и сушке DRYtelligence (включена в Prime Line), наши автоклавы являются лучшим решением - как для вашего бюджета, так и для окружающей среды.



* По сравнению с предшествующими моделями Pro-Class.

**По сравнению с предшествующими моделями Pro-Class с фиксированным подключением к водопроводу

2 размера. 6 моделей. Бесконечные возможности.

Такой же многогранный, как и вы.

Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности, новые автоклавы MELAG выпускаются объемом 17 или 23 литра. и с различным набором функций.

ProLine (автоклавы класса В или S) NEW

Vacuclave 118 / 118 S и Vacuclave 123 / 123 S

Наши модели начального уровня: Автоклавы Pro Line класса В или S предлагают все необходимое для безопасной, удобной и ресурсосберегающей стерилизации.



Мощный класс В или S вакуумная процедура

Надежная стерилизация до 6 кг на 5 лотках всего за 15 до 28 минут (плюс сушка flexDRY от 1 минуты) - сделано в Германии.



Сенсорный дисплей со светодиодным индикатором состояния

Сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом для простого управления как на смартфоне - даже в медицинских перчатках.



Подключение и регистрация данных

Соблюдение правовых требований законодательства благодаря сохранению параметров стерилизации через USB или по сети или распечатки журнала через MELAprint 80.




Автономный концепция устройства

Встроенные резервуары для воды и высокоэффективное воздушное охлаждение для независимая от места эксплуатации без охлаждающей воды.



Энергосбережение режим экономии

Нагреватель и дисплей переходят в режим ожидания между стерилизацией для максимальной энергоэффективности.

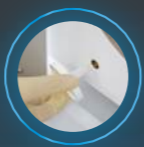

EasyCare концепция рутинной работы

Удобная оптимизация для эффективной замены фильтров, очистки резервуаров и подачи воды.

Vacuclave 318 и Vacuclave 323

Наши чемпионы по соотношению цены и качества: В дополнение к представленным преимуществам продукции, автоклавы Prime Line класса В автоклавы Prime Line класса В впечатляют высокой загрузкой, отличными результатами сушки и расширенными функциями утверждения партий.



Программа Heavy Duty-B

Гибкость по всему периметру: Prime Line предлагает исключительную грузоподъемность до 8 кг.



Сушка DRYtelligence

Сушка, управляемая по алгоритму, обеспечивает оптимальные результаты и сокращение времени сушки до 80%.



Утверждение партии ProControl

ProControl позволяет утверждать партии и аутентифицировать пользователей непосредственно на дисплее без дополнительных программных решений.



Печать этикеток со штрих-кодом

MELAprint 80 может быть использован для печати штрих-кодов этикеток для маркировки и полной прослеживаемости инструментов.



PrimeLine (автоклавы класса В)

Очень нравится качество. Нравится цена.

Экономьте еще больше:

Автоклавы Pro Line класса S представляют собой еще более доступную альтернативу для практик и клиник, которым не требуется автоклав класса В из-за используемых инструментов. Vacuclave 118 S и Vacuclave 123 S даже стерилизуют даже упакованные инструменты с простыми полыми корпусами (например, шарнирные инструменты, такие как ножницы и иглодержатели).



Для вашей безопасности: Все из одного источника.

Системное решение MELAG.

Каждая практика и клиника уникальна. Благодаря индивидуальным системным решениям мы всегда рядом с вами. Наши мойки-дезинфекторы, устройства для герметизации, автоклавы и программные решения воплощают ваши мечты об оптимизированных рабочих процессах в реальность. Идеальное взаимодействие системных решений MELAG позволяет вам добиться большей экономии времени, пространства и средств при переработке инструментов.



Личное:

Один центральный контакт для ответа на все ваши вопросы по переработке



Эффективность:

Оптимизация расходов за счет синхронизации обслуживания всех устройств в вашей комнате обеззараживания



Оптимизированный процесс:

Скоординированная концепция эксплуатации для предотвращения неисправностей в повседневной практике



Уникальный продукт, непревзойденный в системе:



✔ Очистка и дезинфекция с помощью MELAtthem



✔ Упаковка с помощью MELAseal или MELAstore



✔ Паровая стерилизация с Vacuclave



✔ Документация и утверждение с помощью MELAttrace



✔ Маркировка с помощью MELAprint 80

Найдите подходящие аксессуары для вас. И для вашего Vacuclave.

Расширьте границы возможного.

Разнообразие аксессуаров позволяет вам собрать конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Таким образом, Vacuclave обеспечивает максимальную безопасность и эффективность, идеально соответствуя вашему индивидуальному рабочему процессу обработки инструментов.



Впечатляет по всей линии:
Откройте для себя многообещающие преимущества нашей новой линии Pro и Prime

www.melag.com

1. Выберите конфигурацию загрузки:

Для оптимального использования стерилизационной камеры мы предлагаем согласованные системы загрузки.



Крепление A Plus

для размещения пяти лотков для отдельных инструментов или трех MELAstore Boxes 100 для наборов инструментов.



Крепления:

Заказ №. ME82630 для камеры глубиной 45 см
Номер для заказа. ME82620 для камеры глубиной 35 см

Лотки:

Заказ №. ME00230 для камеры глубиной 45 см
Номер для заказа. ME00280 для камеры глубиной 35 см



Держатель фольги

позволяет проводить вертикальную стерилизацию обернутых инструментов для оптимальных результатов сушки. Заказ №. ME22420 для камеры глубиной 45 см. Номер для заказа. ME22410 для камеры глубиной 35 см



Chamber Protect

для тщательной очистки поверхностей из нержавеющей стали поверхности. Набор для очистки камеры содержит мощный очиститель, 50 безворсовых салфеток без ворса и 1 салфетку из микрофибры. Заказ №. ME01081

2. Выберите способ очистки воды:

MELAdem предоставляет высококачественную деминерализованную воду для оптимального сохранения ценности автоклава и инструментов.



MELAdem 40

это компактная ионообменная система для практик и клиник с количеством циклов стерилизации до трех циклов стерилизации в день.
Заказ №. ME01049



MELAdem 47

это высокопроизводительная система обратного осмоса для практик и клиник с повышенными требованиями к стерилизации.

Номер для заказа. ME01047



MELAdem 53 / 53 C

это блок водоподготовки с очень высокой мощностью для MELAtherm и до трех других устройств.

Номер для заказа MELAdem 53: ME01038
Номер для заказа MELAdem 53 C: ME01036



MELAJet

позволяет орошать инструменты деминерализованной водой.*

Заказ №. ME27300

*Совместимость с MELAdem 40 и MELAdem 53

3. Выберите дополнительные принадлежности для документации:

Линейки Pro и Prime Line предлагают юридически совместимую документацию и утверждение с интегрированными USB и сетевыми интерфейсами.



MELAtrace

обеспечивает профессиональное документирование, утверждение и прослеживаемость всего процесс обеззараживания. Загрузите MELAtrace сейчас бесплатно с 90-дневной пробной лицензией с сайта www.melag.com.



MELAprint 80

печатает этикетки со штрихкодом для оптимальной маркировки и отслеживания с помощью MELAtrace и Prime Line или лог файлов с помощью Pro и Prime Line.
Номер для заказа. ME01108



MELAcontrol Type 5

используется для проверки условий стерилизации условий стерилизации (пар, температура и время) и может быть добавлен к обернутым инструментам, а также помещать непосредственно в камеру.
Заказ №. ME01077



MELAcontrol Helix

обеспечивает надежный контроль результат стерилизации в программах класса B в виде спиральной тест-системы с 250 индикаторных полосок.
Заказ №. ME01080

Факты и цифры с первого взгляда

Технические характеристики

Линии Pro и Prime Line гарантируют быструю стерилизацию в соответствии с вашими потребностями благодаря широкому спектру программ:

НОВИНКА	Программы Pro Line (Автоклавы класса S)	Vacuclave 118 S время работы (при минимальной и максимальной нагрузке)*	Vacuclave 123 S время работы (при минимальной и максимальной нагрузке)*	Сушка (с контролем времени)
Universal S	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	18 - 23 мин	20 - 25 мин	25 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	13 - 19 мин	16 - 20 мин	5 мин
Gentle S	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	33 - 37 мин	36 - 38 мин	25 мин
Prion S	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	33 - 38 мин	35 - 40 мин	25 мин

	Программы Pro Line (автоклавы класса B)	Vacuclave 118 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Vacuclave 123 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Сушка (с контролем времени)
Universal B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 27 мин	24 - 31 мин	20 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	15 - 18 мин	16 - 20 мин	5 мин
Quick B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 25 мин	24 - 27 мин	10 мин
Gentle B	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	39 - 47 мин	20 мин
Prion B	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	37 - 48 мин	20 мин

Программы Prime Line (автоклавы класса B)	Vacuclave 318 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Vacuclave 323 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Trocknung		
			Драйтеллидженс**	контролируемое время	
Universal B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 27 мин	24 - 31 мин	> 1 мин	20 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	15 - 18 мин	16 - 20 мин	> 1 мин	5 мин
Quick B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 25 мин	24 - 27 мин	> 1 мин	10 мин
Gentle B	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	39 - 47 мин	> 1 мин	20 мин
Prion B	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	37 - 48 мин	> 1 мин	20 мин
Heavy Duty B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин	22 - 32 мин	24 - 35 мин	> 1 мин	30 мин

* Спецификации для программы Quick-S для неупакованных грузов и для всех остальных программ для одноупакованных грузов. Время может варьироваться в зависимости от типа и количества загрузки

** Система DRYtelligence автоматически подстраивает процесс сушки под вашу загрузку. Благодаря интеллектуальному процессу сушки достигается оптимальный результат в любое время

Автоклавы Pro и Prime Line могут быть быстро и легко установлены в качестве настольных автоклавов в любом помещении для переработки. Ознакомьтесь с техническими характеристиками:

	Pro Line				Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 118 S	Vacuclave 123	Vacuclave 123 S	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Заказ №:	ME10118	ME10118S	ME10123	ME10123S	ME10318	ME10323
Тип устройства:	Автономный автоклав (совместим с дополнительным блоком водоподготовки)					
Класс автоклава:	Класс B	Класс S	Класс B	Класс S	Класс S	Класс B
Размер камеры:	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину
Объем камеры:	17 литров	17 литров	23 литров	23 литров	17 литров	23 литров
Количество груза:	макс. 5 кг инструментов / 1,8 кг текстиля	макс. 4 кг инструментов / 1 кг текстиля	макс. 6 кг инструментов / 2 кг текстиля	макс. 5 кг инструментов / 1 кг текстиля	макс. 7 кг инструментов / 1,8 кг текстиля	макс. 8 кг инструментов / 2 кг текстиля
Размеры устройства (Ш x В x Г):	47 x 50 x 64 см (устройство помещается на столешнице высотой 60 см)					
Вес	48 кг	46 кг	49 кг	47 кг	48 кг	49 кг
Электропитание	220 - 230 В / 50 - 60 Гц					
Потребляемая мощность	2 100 Вт					
Документация Интерфейсы:	USB, сеть					

Rev.1-25/1469-06.25-RU-ME



Экономьте бумагу, берегите окружающую среду:

Чтобы сократить количество бумаги, мы предоставляем вам электронную пользовательскую документацию через наш Центр загрузки. Дополнительная информация: www.melag.com

MELAG
competence in hygiene